




INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

AT51124 ROTOR REHABILITACYJNY

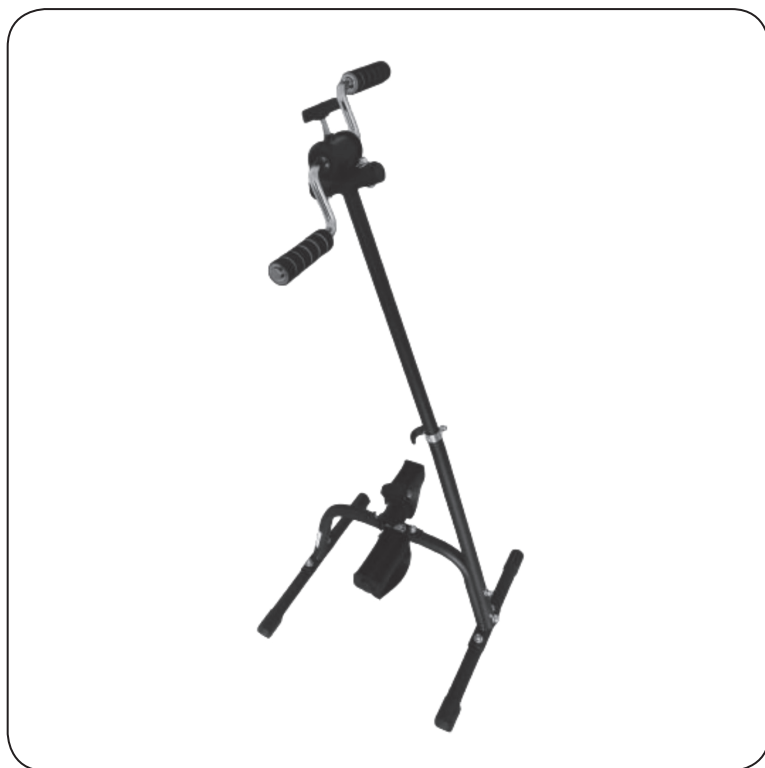

OSTRZEŻENIA OGÓLNE

Ostrzeżenie: Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek bezpieczeństwa może spowodować obrażenia ciała lub urazy, które nie będą sprzyjały powrotowi do Zdrowia.

Ostrzeżenie:

1. Nie stawać na pedałach.
2. Podczas ćwiczeń należy siedzieć na krześle, kanapie lub łóżku.
3. Przed użyciem produktu należy upewnić się, że wszystkie śruby, wkrety, pokręta, ramy i wsporniki zostały zamocowane.
4. Pacjenci, osoby niepełnosprawne i starsze muszą z niego korzystać w towarzystwie innej osoby.
5. Osoby cierpiące na choroby serca lub mające zakaz wykonywania forsownych ćwiczeń powinny stosować się do zaleceń lekarza i wykonywać odpowiednie ćwiczenia.
6. Niniejszego produktu nie powinny stosować osoby z niewyleczonymi urazami.
7. Należy sprawować ścisły nadzór nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi podczas korzystania przez nie z urządzenia.
8. Ten produkt jest specjalnie zaprojektowany do użytku rodzinnego.
9. W celu uniknięcia urazów w trakcie transportu urządzenia należy zwracać szczególną uwagę na kwestie bezpieczeństwa.
10. Przed użyciem produktu należy wykonać odpowiednie ćwiczenia rozciągające, aby zapobiec urazom ciała podczas ćwiczeń.

UWAGA: Należy sprawdzić wszystkie części pod kątem uszkodzeń powstałych podczas przewozu. W przypadku zauważenia takich uszkodzeń, NIE WOLNO używać produktu. Więcej informacji u wytwórcy.

UWAGA: W przypadku wystąpienia związanego w wyrobem „poważnego incydentu”, który bezpośrednio lub pośrednio doprowadził, mógł doprowadzić lub może doprowadzić do któregośkolwiek z niżej wymienionych zdarzeń:

- a) zgonu stanu zdrowia pacjenta, użytkownika lub innej osoby lub
- b) czasowego lub trwałego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, użytkownika lub innej osoby lub
- c) poważnego zagrożenia zdrowia publicznego

należy powyższy „poważny incydent” zgłosić producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania. W przypadku Polski właściwym organem jest Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

UWAGA: W przypadku wystąpienia bólu, reakcji alergicznych lub innych niepokojących, niejasnych dla użytkownika objawów związanych z użytkowaniem wyrobu medycznego należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia.

UWAGA: Podczas użytkowania i obsługi produktu oraz podczas jego składania i regulowania mechanizmów może zaistnieć niebezpieczeństwo uwięźnięcia i/lub ściśnięcia części ciała użytkownika/osoby towarzyszącej w otworach/szczelinach pomiędzy elementami. Należy wykonywać te czynności szczególnie ostrożnie. Po zakończeniu regulacji ustabilizować pozycję poprzez dokładne dokręcenie nakrętek/śrub.

PRZEZNACZENIE

Rotor rehabilitacyjny to kompaktowy rower do ćwiczeń, który można z łatwością przechowywać, gdy zajdzie taka potrzeba. Rotor stosuje się głównie przy rehabilitacji osób z niedowładem kończyn spowodowanym m.in. wypadkiem bądź udarem. Używany regularnie pobudza krążenie krwi i zwiększa siłę mięśniową. To świetny sposób na umiarkowane ćwiczenia układu sercowo-naczyniowego.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W TRAKCIE UŻYTKOWANIA


Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje. W przypadku poniższych stanów użytkownik powinien zwrócić uwagę na czas ćwiczeń i skonsultować się z lekarzem przed użyciem produktu.

1. Choroby serca.
2. Zaburzenia sensoryczne.
3. Osteoporoza lub cukrzyca.
4. Cięża.
5. Złośliwy nowotwór.
6. Wysokie ciśnienie krwi i choroby o ostrym przebiegu.
7. Pacjenci z łzami złamaniami lub złamaniami łędźwiowymi; na przykład cierpiący na choroby mięśni szkieletowych.
8. Artretyzm.
9. Zawroty głowy i szumy uszne.

Zalecamy, aby przed użyciem produktu skonsultować się z lekarzem.

SZCZEGÓŁOWY OPIS AKCESORIÓW

Nazwa części	Ilość	Uwaga
Podstawa rotora	Dwa	Z zestawem na stopy
Stelaż U	Jeden	
Kolumna T	Jeden	
Kolumna prosta	Jeden	Nakrętka boczna
Element wyposażony w pedały/uchwyty	Dwa	Z zestawem na stopy/dłonie
Trójkątne pokrętło	Dwa	
Śruba M8*40 MM	Osiem	
Śruba M8*60 MM	Dwa	
Śruba blokująca M8	Dziesięć	
Klucz widelkowy	Jeden	
Klucz L	Jeden	

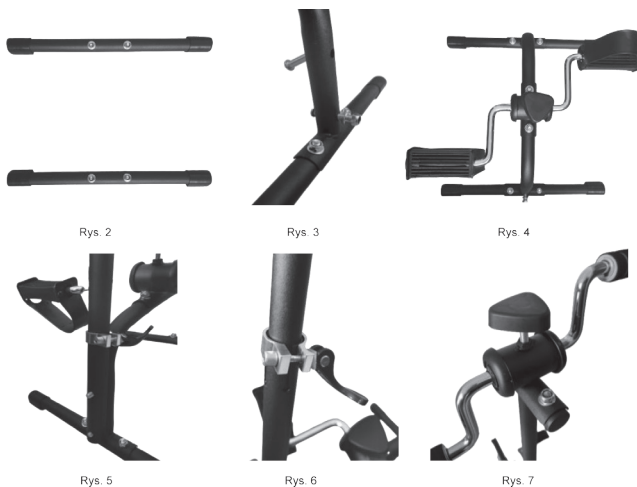

- Krok 1 Należy ustawić dwie rurki podstawy (rys. 2) a następnie połączyć ramę U z podstawą rotora, w tym celu użyć śruby M8*10 MM z nakrętką zabezpieczającą, zwracając uwagę na kierunek górnej tulei. (rys. 3)
- Krok 2 Następnie należy przymocować element z pedałami (wraz z tuleją stopki). Za pomocą śruby M8*40 MM. (rys. 4)
- Krok 3 Przykręcić trójkątne pokrętko w przeznaczone miejsce, w celu regulacji oporu podczas treningu należy przekręcać dolne pokrętko. (rys. 4)
- Krok 4 Należy użyć śrub M8*60 MM i nakrętek do połączenia kolumny prosta z podstawą rotora. Zwrócić uwagę na kierunek kolumny i połączenie wklęsłe. (rys. 5)
- Krok 5 Należy włożyć kolumnę w kształcie litery T. Zwracając uwagę na kierunek pionowy kolumny w kształcie litery T, zamocować kolumnę w kształcie litery T za pomocą klamry na odpowiedniej wysokości. Jednocześnie należy użyć klucza L, aby dokręcić śrubę regulacyjną na boku klamry. (rys. 6)
- Krok 6 Należy użyć śrub M*40 MM i nakrętek do zamocowania górnej części rotora, przykręcić trójkątne pokrętko w górnej części. W celu regulacji oporu podczas treningu należy przekręcać górne pokrętko. (rys. 7)
- Krok 8 Dokończyć montaż, upewnić się, że wszystkie śruby zostały odpowiednio dokręcone i dostosować wysokość przyrządu do własnych potrzeb.

Środki ostrożności w trakcie użytkowania:

Podczas korzystania z produktu należy starać się, aby nogi i ramiona były rozluźnione.

Podczas ćwiczeń należy nosić wygodne ubrania.

Ćwiczenie w przeciwnym kierunku może spowodować uraz nóg i rąk.

Nie należy się nadmiernie forsować.

Należy ustawić przyrząd na płaskiej podłodze. Jeśli przyrząd stoi na drewnianej podłodze lub dywanie, należy podłożyć pod nim matę, aby uniknąć uszkodzenia podłogi i dywanu podczas ćwiczeń.

W celu uniknięcia urazów w trakcie transportu urządzenia należy zwracać szczególną uwagę na kwestie bezpieczeństwa.

PARAMETRY

Waga: 2,8 kg

Podstawa rotora: 40 cm x 40 cm

Maksymalna wysokość: 100 cm

Minimalna wysokość: 75 cm

Wysokość ramy U: 20 cm

Rozstaw uchwytów: 42 cm

Rozstaw pedałów: 42 cm

Maksymalna waga użytkownika: 120 kg



TEN ZNAK OZNACZA MAKSYMALNĄ WAGĘ UŻYTKOWNIKA.

CZYSZCZENIE/KONSERWACJA

Należy czyścić za pomocą wilgotnej ściereczki z mydłem.

Dla zachowania parametrów użytkowych wyrobu niezwykle ważne jest utrzymanie wszelkich jego elementów w czystości, oraz sposób przechowywania. Składowanie w pomieszczeniach o bardzo wysokiej wilgotności (łaźnie, pralnie itp.), lub na wolnym powietrzu, w połączeniu z brakiem higieny spowoduje szybką utratę parametrów użytkowych i estetycznych.

UWAGA: Nie wystawiaj produktu na działanie ekstremalnych warunków pogodowych (deszcz, śnieg bardzo silne słońce), gdyż pewne elementy mogą zmienić kolor.

UWAGA: Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane zaniedbaniami konserwacji, nieodpowiednim serwisowaniem bądź będące skutkiem nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

UWAGA: Zabronione jest użytkowanie produktu w sposób inny niż zgodnie z jego przeznaczeniem!

UWAGA: Wszystkie ćwiczenia wykonywane powinny być w pozycji siedzącej, zabronione jest stawianie na pedałach.

UTYLIZACJA: Odpad komunalny, prosimy zutylizować zgodnie z obowiązującymi warunkami utylizacji.

KARTA GWARANCYJNA

Model:

Numer Seryjny:

Pieczęć punktu sprzedaży

i czytelny podpis Sprzedającego:

- 1) ANTAR Sp. J., 03-068 Warszawa, ul. Zawiślańska 43, niniejszym udziela 12-miesięcznej gwarancji na wyrób, począwszy od daty nabycia produktu przez Kupującego. Dla produktów, których zakup jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, okres gwarancji jest przedłużony i obejmuje połowę okresu użytkowania podanego w Rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych, pod warunkiem, że okres użytkowania został podany w Rozporządzeniu w miesiącach lub latach.
- 2) W okresie gwarancji ANTAR zobowiązuje się do wykonania napraw niezbędnych do przywrócenia odpowiedniego funkcjonowania produktu, w okresie 14 dni od daty otrzymania produktu przez serwis wraz z dowodem zakupu oraz kartą gwarancyjną.
- 3) ANTAR zastrzega sobie prawo do wymiany produktu w przypadku uznania, że koszty naprawy nie są opłacalne. Naprawa lub wymiana wadliwych produktów nie powoduje przedłużenia okresu gwarancji.
- 4) W przypadku stwierdzenia, że produkt działa nieprawidłowo, należy go niezwłocznie przesłać na adres ANTAR (podany w punkcie 1) lub skontaktować się z punktem sprzedaży.
- 5) Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie przeczytać instrukcję i postępować zgodnie z jej postanowieniami. Korzystanie z produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami powoduje nieodwołalną utratę gwarancji.
- 6) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zewnętrzną siłą mechaniczną, obciążeniem przekraczającym maksymalną dopuszczalną wagę użytkownika zgodnie z opisem w instrukcji, a także kontaktem produktu z alkoholem, tłustymi substancjami lub benzyną. Gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu podczas użytkowania, takich jak łożysko, elementy gumowe i inne.
- 7) Produkt przekazywany do serwisu w związku z reklamacją nie może spowodować epidemii.
- 8) NINIEJSZA GWARANCJA JEST WAŻNA WYŁĄCZNIE WRAZ Z DOWODEM ZAKUPU (RACHUNEK, PARAGON, FAKTURA). W PRZYPADKU REKLAMACJI NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DOWÓD ZAKUPU. W CELU UZNANIA PRZEDŁUŻONEGO OKRESU GWARANCJI DLA PRODUKTÓW, KTÓRYCH ZAKUP BYŁ REFUNDOWANY PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA, NALEŻY ZAŁĄCZYĆ KOPIĘ ZLECENIA NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI I ŚRODKI POMOCNICZE.
- 9) Reklamacje złożone bez dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej z numerem seryjnym produktu nie będą uwzględniane.



ANTAR Sp. J.
03-068 Warszawa, ul. Zawiślańska 43
Polska
Tel. 22 518 36 00, Fax 22 518 36 30
www.antar.net e-mail: antar@antar.net

