

Instrukcja obsługi

Podpórka ułatwiająca chodzenie typu AMBONA

Kod produktu TGR-R RS 8812



Szanowni Użytkownicy,

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Mamy nadzieję, że wybrany sprzęt spełni Państwa oczekiwania. W związku z tym przedstawiamy kilka istotnych informacji.

Timago International Group to polska firma dystrybuująca produkty medyczne rehabilitacyjne i ortopedyczne do aptek i sklepów medycznych.

Na co dzień dbamy o Państwa komfort oferując produkty o wysokiej jakości, funkcjonalne i bezpieczne.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży. Nasze produkty za sprawą dystrybutorów trafiają do szerokiego grona użytkowników w Polsce i Europie.

Jako firma otwieramy się na Państwa potrzeby. Zależy nam, aby świadomie i umiejętnie wykorzystywano nasze produkty w leczeniu i rehabilitacji, poprawiając własny komfort i jakość życia.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami na naszej stronie internetowej.

www.timago.com

1. Wstęp

Przed przystąpieniem do użytkowania produktu należy sprawdzić, czy sprzęt nie zawiera ewentualnych uszkodzeń mogących wystąpić podczas transportu. Jeżeli taka sytuacja wystąpiła prosimy o kontakt z punktem sprzedaży.

Następnie ważnym jest zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji, która zawiera istotne dla użytkownika informacje.

W przypadku pytań dotyczących korzystania ze sprzętu prosimy o kontakt. Nasi pracownicy na bieżąco udzielą Państwu niezbędnych informacji.

Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że jeżeli posiadają Państwo pytania w zakresie innym niż użytkowanie produktów, prosimy o skontaktowanie się z lekarzem, pielęgniarką lub fizjoterapeutą.

2. Wykonanie


Podpórka ułatwiająca chodzenie czterokołowa, wykonana jest ze stalowej chromowanej ramy. Wyposażona w piankowe uchwyty, uchwyt na kroplówkę, tapicerowane podparcie pod łokcie z możliwością płynnej regulacji wysokości, zdejmowane siedzisko oraz obrotowe koła z blokadą.

Zestaw zawiera:

- ramę podpórki wraz z kołami
- ramę stabilizującą górną
- ramę stabilizującą dolną
- podparcie pod łokcie
- siedzisko
- klipsy blokujące- 4 szt.
- śruby blokujące motylkowe – 2 szt.

Elementy podpórki:

- a. uchwyt
- b. podparcie pod łokcie
- c. klips blokujący
- d. rama stabilizująca górna
- e. rama stabilizująca dolna
- f. śruba montażowa motylkowa
- g. siedzisko
- h. uchwyt na kropłówkę
- i. hamulec

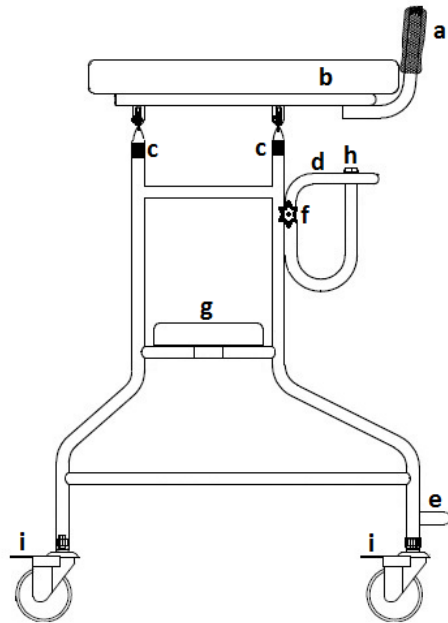

3. Zastosowanie

Podpórka ułatwiająca chodzenie jest sprzętem pomocniczym, przeznaczonym dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas pionizacji oraz chodzenia. Podpórka przeznaczona jest dla pacjentów o różnym typie zaburzeń motorycznych z ograniczoną ruchomością i dysfunkcją kończyn dolnych lub ich osłabieniem. Zalecana jest również osobom starszym, jako pomoc w utrzymaniu równowagi, poprawy komfortu poruszania się i zapewnienia bezpieczeństwa przed upadkiem. Zastosowanie podpórki wpływa pozytywnie na powrót do aktywności osób mających problemy z lokomocją lub pionizacją. Gwarantuje lepszą stabilność, podparcie i bezpieczeństwo podczas chodzenia.

4. Montaż i główne zalecenia użycia

Uwaga! Podczas montażu i regulacji należy stosować się do informacji zawartych w instrukcji. Użytkownicy z obniżoną sprawnością ruchową mogą potrzebować pomocy osoby trzeciej, która posiada odpowiednie umiejętności.

Uwaga! Nie należy używać podpórki w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek widocznych lub wyczuwalnych uszkodzeń (np. pęknięcie ramy), ponieważ grozi to wypadkiem.

Rozłożenie podpórki

- Ramę podpórki należy postawić na podłożu tak, aby rama stabilizująca dolna była od zewnątrz. Następnie należy zamontować ramę stabilizującą górną w otworach montażowych w części przedniej ramy i dokręcić ją śrubami montażowymi.
- Następnie należy zamontować podparcie pod łokcie w otworach montażowych ramy podpórki i zablokować klipsami blokującymi na odpowiedniej wysokości.
- Siedzisko służy do chwilowego spoczynku i należy go zamontować na dolnej części ramy. W przypadku poruszania się z podpórką siedzisko należy zawiesić w części zewnętrznej ramy podpórki.
- W przypadku korzystania z kroplówki, należy zamontować ją w otworze montażowym w przedniej części ramy podpórki.

Uwaga! Należy zachować ostrożność podczas składania podpórki, ze względu na ryzyko przytraśnięcia palców w zawiasach.

Funkcja hamulców

Uwaga! Podczas korzystania z siedziska należy bezwzględnie zablokować wszystkie hamulce. Podczas pierwszego użycia podpórki może być konieczna pomoc osoby trzeciej, bez względu na stan zdrowia użytkownika.

Regulacja wysokości podparcia pod łokcie

Wysokość należy ustawić na takim poziomie, aby użytkownik korzystając z podpórki, stał wyprostowany na tyle, na ile pozwala mu stan zdrowia, z ramionami w pozycji spoczynkowej i łokciami opartymi na podparciach. Niewskazane jest zawieszanie się na podpórce całym ciężarem ciała.

Aby wyregulować wysokość podparcia pod łokcie, należy wyciągnąć klips blokujący znajdujący się na zewnętrznej stronie ramy, następnie wybrać odpowiednią wysokość i ponownie zamontować klips blokujący.

5. Specyfikacja techniczna

Szerokość całkowita	63 cm
Głębokość całkowita	76 cm
Wymiary siedziska	56 cm x 20 cm
Wysokość siedziska od podłoża	54 cm
Regulacja wysokości podparcia pod łokcie	101-124 cm
Waga	10,8 kg
Max obciążenie	100 kg

6. Uwagi i zalecenia

- Z podpórki może korzystać tylko jedna osoba.
- Siedzisko służy tylko do chwilowego spoczynku.
- Przed skorzystaniem z siedziska należy uruchomić hamulce postojowe.
- Nie wolno korzystać z siedziska podpórki w celach transportowych.
- Podczas siedzenia na podpórce nie wolno wychylać się do tyłu, ponieważ może być to przyczyną wypadku.
- Nie wolno stawać na podpórce.
- Nie wolno zawieszać żadnych przedmiotów na podpórce, ponieważ może być to przyczyną wypadku.
- Podpórka przeznaczona jest dla użytkowników o maksymalnej wadze 100 kg
- Podpórka przeznaczona jest do użycia na równych powierzchniach o nachyleniu mniejszym niż 5%.
- Ze względu na ryzyko upadku niedopuszczalne jest użycie podpórki na podłożu niedającym pewnego oparcia, tj. mokrym, oblodzonym, tłustym, silnie zapiaszczonym.
- Dla bezpieczeństwa zaleca się usunięcie możliwych przeszkód w pomieszczeniu, zbyt wysokich dywanów, wystających progów, a także wyłożenie matami antypoślizgowymi śliskich podłóg.

- Należy unikać mokrych powierzchni w pomieszczeniach i poruszać się przy zapalonym świetle.
- Należy zachować szczególną ostrożność poruszając się po nierównym chodniku, przy pokonywaniu krawężników. Nie należy chodzić tyłem.
- **Nie należy** dokonywać samodzielnych napraw lub przeróbek konstrukcyjnych. Wszelkie naprawy należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi wytwórcy.
- Dla zachowania parametrów użytkowych podpórki ważne jest utrzymanie wszelkich jej elementów w czystości oraz odpowiedni sposób przechowywania. Składowanie w pomieszczeniach o bardzo wysokiej wilgotności (łazienki, pralnie itp.) lub na wolnym powietrzu, w połączeniu z brakiem higieny spowoduje szybką utratę parametrów użytkowych i estetycznych.

UWAGA! Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

7. Konserwacja

Przeglądy

Należy, co najmniej raz na trzy miesiące, wykonać przegląd wizualny wszystkich elementów łączących (zatraskowych, zawiasowych) wyrobu w tym należy sprawdzić:

- Hamulce
- Elementy mocujące (śruby)
- Regulację wysokości podparcia pod łokcie
- Stabilność i wygląd ramy

Czyszczenie

- Ramę podpórki należy czyścić wilgotną szmatką, a następnie dokładnie osuszyć.
- Nie należy używać ostrych środków polerskich, gdyż grozi to zniszczeniem powłok zabezpieczających.
- Należy na bieżąco usuwać zanieczyszczenia z ruchomych elementów podpórki (zawiasów, śrub zaciskowych, blokad).










8. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę objęte są gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej, jaką otrzymali Państwo w momencie zakupu. Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

Jako firma przyjazna użytkownikom, dostarczamy wyłącznie produkty sprawdzone, pod względem materiałowym, jakościowym i funkcjonalnym.

Jeżeli posiadają Państwo pytania dotyczące procedury serwisowej prosimy o kontakt.

9. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Wytwórca
	Numer partii		Data produkcji
	Numer seryjny		Reprezentant w Unii Europejskiej
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Wytwórca dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

10. Produkty polecane

W ofercie Timago International Group znajdują Państwo m.in.:

- Ortezy i stabilizatory stawów
- Wózki inwalidzkie ręczne i specjalne
- Balkoniki i podpórki do chodzenia
- Kule i laski
- Łóżka rehabilitacyjne
- Sprzęt pomocniczy i sanitarny
- Sprzęt i akcesoria przeciwoodleżynowe
- Pasy stabilizujące i unieruchamiające
- Sprzęt elektromedyczny
- Jednorazowy sprzęt medyczny

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów.

Dowiedz się więcej na: www.timago.com



Wytwórca:

Timago International Group

Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Polska

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



Wydanie I, data aktualizacji 21.11.2018