

Instrukcja obsługi

Taboret prysznicowy z oparciem i siedziskiem typu U – system TF

Kod produktu: TGR-R KP-U 3522



Szanowni Użytkownicy,

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Mamy nadzieję, że wybrany sprzęt spełni Państwa oczekiwania. W związku z tym przedstawiamy kilka istotnych informacji.

Timago International Group to polska firma dystrybuująca produkty medyczne rehabilitacyjne i ortopedyczne do aptek i sklepów medycznych.

Na co dzień dbamy o Państwa komfort oferując produkty o wysokiej jakości, funkcjonalne i bezpieczne.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży. Nasze produkty za sprawą dystrybutorów trafiają do szerokiego grona użytkowników w Polsce i Europie.

Jako firma otwieramy się na Państwa potrzeby. Zależy nam, aby świadomie i umiejętnie wykorzystywano nasze produkty w leczeniu i rehabilitacji, poprawiając własny komfort i jakość życia.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami na naszej stronie internetowej.

www.timago.com

1. Wstęp

Przed przystąpieniem do użytkowania produktu należy sprawdzić, czy sprzęt nie zawiera ewentualnych uszkodzeń mogących wystąpić podczas transportu. Jeżeli taka sytuacja wystąpiła prosimy o kontakt z punktem sprzedaży.

Następnie ważnym jest zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji, która zawiera istotne dla użytkownika informacje.

W przypadku pytań dotyczących korzystania ze sprzętu prosimy o kontakt. Nasi pracownicy na bieżąco udzielą Państwu niezbędnych informacji.

Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że jeżeli posiadają Państwo pytania w zakresie innym niż użytkowanie produktów, prosimy o skontaktowanie się z lekarzem, pielęgniarką lub fizjoterapeutą.

2. Wykonanie

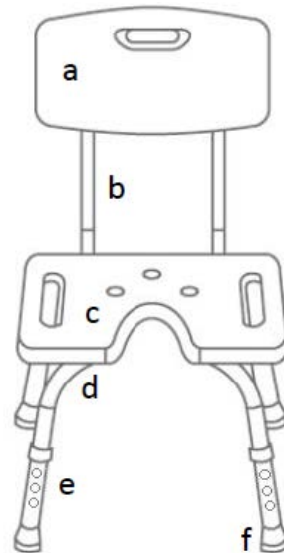
Taboret prysznicowy składa się z aluminiowej ramy oraz szerokiego siedziska wykonanego z wytrzymałego PCV. Posiada regulowane na wysokość nóżki zakończone gumowymi nasadkami antypoślizgowymi oraz boczne uchwyty przy siedzisku ułatwiające korzystanie z przyrządu. Specjalnie zaprojektowane gumowe końcówki nóg skutecznie zapobiegają ślizganiu się na wilgotnych powierzchniach. Taboret dodatkowo został wyposażony w system TF ułatwiający montaż.

Zestaw zawiera:

- oparcie- 1 szt.
- rurki montażowe oparcia- 2 szt.
- siedzisko- 1 szt.
- rurki podstawy taboretu- 2 szt.
- nóżki z regulacją wysokości- 4 szt.
- śruby montażowe (motylki)- 9 szt.

Części składowe:

- a. oparcie
- b. rurki montażowe oparcia
- c. siedzisko
- d. rurki podstawy taboretu
- e. regulacja wysokości- system TF
- f. nasadki antypoślizgowe



3. Zastosowanie

Taboret prysznicowy jest sprzętem pomocniczym ułatwiającym użytkownikowi wykonywanie czynności higienicznych. Polecany jest osobom o obniżonej sprawności ruchowej, która uniemożliwia bądź utrudnia samodzielne wykonywanie czynności życia codziennego. Taboret polecany jest do stosowania pod prysznicem, w wannie, łazience i innych wilgotnych pomieszczeniach, w warunkach domowych i szpitalnych.

4. Montaż i główne zalecenia użycia

Uwaga! Podczas montażu i regulacji należy stosować się do informacji zawartych w instrukcji. Użytkownicy z obniżoną sprawnością ruchową mogą potrzebować pomocy osoby trzeciej, która posiada odpowiednie umiejętności.

Uwaga! Nie należy używać taboretu w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek widocznych lub wyczuwalnych uszkodzeń (np. pęknięcie), ponieważ grozi to wypadkiem.

Uwaga! Przed pierwszym użyciem taboretu należy sprawdzić poprawność montażu.

MONTAŻ

Krok 1. Siedzisko taboretu położyć płasko na podłożu.

Krok 2. Następnie za pomocą jednej śruby motylkowej z podkładką należy zamontować siedzisko na środku ze skrzyżowanymi rurkami podstawy taboretu.

Krok 3. Rurki podstawy taboretu należy połączyć z nóżkami.

Krok 4. Następnie za pomocą czterech śrub motylkowych i podkładek należy przykręcić rurki oparcia do rurek podstawy.

Krok 5. Taboret z zamontowanym siedziskiem i rurkami oparcia należy postawić na nóżkach, a następnie przykręcić oparcie za pomocą czterech śrub motylkowych z podkładkami.

REGULACJA WYSOKOŚCI

- Aby wyregulować wysokość taboretu, należy wcisnąć metalowy sztyft, wybrać odpowiednią wysokość nóżki, a następnie zablokować położenie względem siebie sztyftem blokującym. Nóżki regulowane są skokowo co 2,5 cm.

Uwaga! Sztyfty we wszystkich nóżkach muszą być ustawione na tym samym poziomie.

5. Specyfikacja techniczna

Szerokość	48 cm
Głębokość	40 cm
Wysokość siedziska	35-52 cm
Wysokość całkowita	70-87 cm
Wymiary siedziska	48 x 31 cm
Waga	2,8 kg
Maksymalne obciążenie	110 kg

6. Uwagi i zalecenia

- Podczas czynności higienicznych z taboretu może korzystać tylko jedna osoba.
- Osoby z obniżeniem sprawności ruchowej podczas korzystania z taboretu wymagają asysty osoby trzeciej.
- **Nie wolno** stawać na taborecie.
- **Nie należy** opierać się o taboret, w celach innych niż siadanie i wstawanie.
- **Nie należy** przytwierdzać przedmiotów do taboretu, ponieważ może być to przyczyną wypadku.
- **Nie należy** przekraczać maksymalnego obciążenia taboretu (110 kg).
- W łazience należy usunąć możliwe przeszkody oraz sprawdzić, czy podłoga jest równa. Śliskie podłogę należy zabezpieczyć, np. matami antypoślizgowymi.
- Ze względu na ryzyko upadku niedopuszczalne jest użycie taboretu na podłozu nie dającym pewnego oparcia.
- Taboret przeznaczony jest do użycia wyłącznie na równych, płaskich powierzchniach.

- **Nie należy** dokonywać samodzielnych napraw lub przeróbek konstrukcyjnych, wszelkie naprawy należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi Wytwórcy.
- Nie należy przechowywać taboretu w pomieszczeniach o bardzo wysokiej wilgotności (łazienki, pralnie itp.), w ujemnej temperaturze lub na wolnym powietrzu.

UWAGA! Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z taboretu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

7. Konserwacja

- Taboret należy czyścić regularnie używając wody, gąbki i łagodnych środków czyszczących do tworzyw sztucznych np. mydła lub delikatnych detergentów posiadających atest PZH, po każdym użyciu wycierać do sucha.
- **Nie należy używać** do czyszczenia: silnych detergentów, środków ściernych, wybielaczy, benzyny ani żadnych rozpuszczalników (grozi uszkodzeniem ramy, widocznymi ubytkami, a w konsekwencji - utratą praw gwarancyjnych).
- Co najmniej raz na 3 miesiące należy sprawdzić:
 - dokręcenie śrub motylkowych
 - stan sztyftów blokujących
 - stan rurek (pod kątem pęknięć)
 Zaleca się regularną kontrolę nasadki gumowej. W przypadku zużycia, należy wymienić nasadkę na nową.





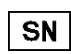
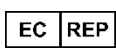



8. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę objęte są gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej, jaką otrzymali Państwo w momencie zakupu. Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

Jako firma przyjazna użytkownikom, dostarczamy wyłącznie produkty sprawdzone, pod względem materiałowym, jakościowym i funkcjonalnym.

Jeżeli posiadają Państwo pytania dotyczące procedury serwisowej prosimy o kontakt.

9. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Wytwórca
	Numer partii		Data produkcji
	Numer seryjny		Reprezentant w Unii Europejskiej
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Wytwórca dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

10. Produkty polecane

W ofercie Timago International Group znajdują Państwo m.in.:

- Ortezy i stabilizatory stawów
- Wózki inwalidzkie ręczne i specjalne
- Balkoniki i podpórki do chodzenia
- Kule i laski
- Łóżka rehabilitacyjne
- Sprzęt pomocniczy i sanitarny
- Sprzęt i akcesoria przeciwośluzynowe
- Pasy stabilizujące i unieruchamiające
- Sprzęt elektromedyczny
- Jednorazowy sprzęt medyczny

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów.

Dowiedz się więcej na www.timago.com



Wytwórca:

Timago International Group

Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Polska

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



Wydanie II, data aktualizacji 10.10.2016